


Accu-Chek Performa®

Glucómetro

>> Sistema de Monitoreo
de Glucosa
en la Sangre

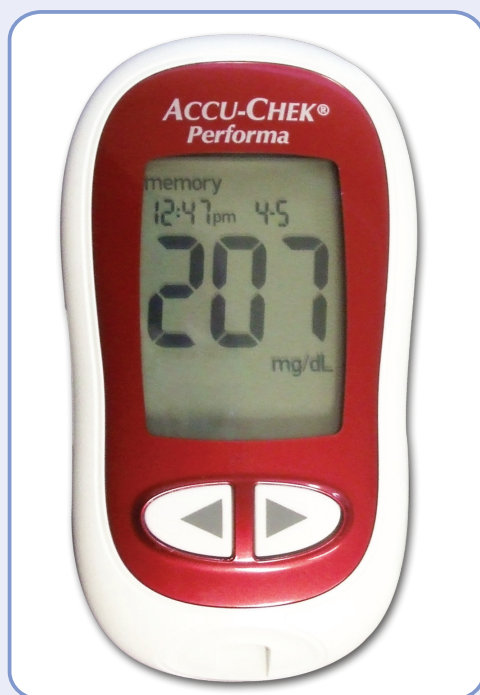

El sistema Accu-Chek® Performa sirve para la determinación cuantitativa de la glucemia. Puede ser utilizado por pacientes que controlan ellos mismos su glucosa, así como por profesionales de la salud para controlar los valores de glucemia en los pacientes.

Realizar mediciones de glucemia regularmente puede significar una gran diferencia en la manera en que se controla la diabetes diariamente. El medidor de Glucosa Accu-Chek® Performa ha sido diseñado para uso externo (in vitro) para realizar mediciones con muestras frescas de sangre entera (p. ej. Sangre procedente de la yema del dedo o del antebrazo). Accu-Chek® Performa no debe usarse para diagnosticar la diabetes.

Este medidor requiere el uso de tiras reactivas Accu-Chek® Performa, otras tiras reactivas proporcionarían resultados erróneos.

El sistema Accu-Chek® Performa incluye:

- Medidor Accu-Chek® Performa con pila
- Tiras reactivas Accu-Chek® Performa y chip de codificación
- Solución de control Accu-Chek® Performa



Monitor de Prueba

Parte frontal


Parte posterior




Tiras de Prueba

TIRA DE PRUEBA

Las tiras reactivas Accu-Chek® Performa han sido diseñadas con una Tecnología inteligente, que le permite detectar y corregir influencias externas como temperatura, humedad, daño en la tira reactiva o muestra insuficiente de sangre, evitando que ellas interfieran en el resultado de su glucemia. Las tiras reactivas Accu-Chek® Performa tienen el tamaño perfecto para que puedas utilizarlas con facilidad.

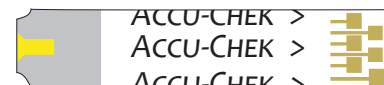

Aplicación de la muestra

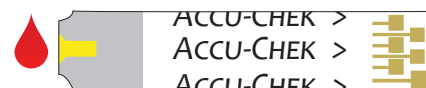

Chip de codificación



Cada Frasco de tiras reactivas Accu-Chek® Performa cuenta con un chip codificador único.

*Las Tiras de Prueba de Glucosa en la Sangre Accu-Chek® Performa se venden por separado.



Diinsel S.A. de C.V.
Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L.
México 64620
Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad

Accu-Chek Performa®

Glucómetro


>> Sistema de Monitoreo
de Glucosa
en la Sangre

Dispositivo de Punción

Las características del puncionador:

- Carga con una sola mano
- Diseño fácil para el usuario
- Tecnología probada menos dolorosa

El dispositivo de punción es apto únicamente para uso personal.

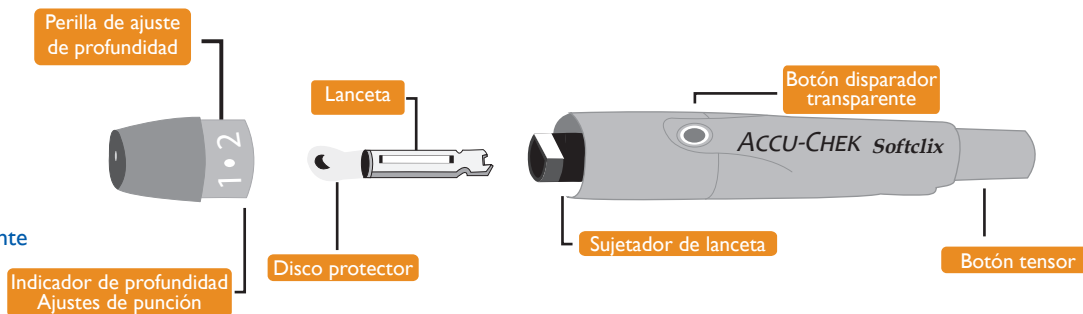

Instrucciones de uso:



1.- Prepare el dispositivo de punción.


2.- Lávese las manos y séquelas. Extraiga una tira reactiva del frasco de la tiras reactivas. Cierre bien el frasco herméticamente.



3.- Introduzca la tira reactiva en el medidor en el sentido de las flechas. El medidor se enciende.




4.- Asegúrese de que el número de código de la pantalla concuerde con el del frasco de tiras reactivas. Si no llega a ver el número de código, extraiga la tira reactiva e introdúzcala de nuevo en el medidor.

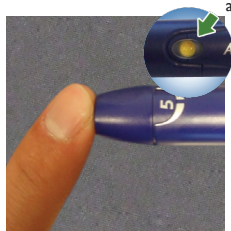


Botón disparador amarillo

5.- Cuando el símbolo de la gota de sangre parpadea, obtenga una gota de sangre de la yema del dedo. Para realizar una prueba con sangre de lugares alternativos, consulte las instrucciones de uso.

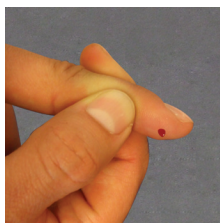




6.- Apriete ligeramente su dedo para estimular el flujo de la sangre. Esto ayuda a obtener una gota de sangre.

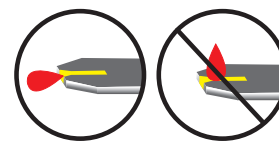

7.- Rocio el borde delantero de la ventana amarilla de la tira reactiva con la gota de sangre. No deposite sangre encima de la tira reactiva.



8.- Cuando el símbolo ⌚ parpadea, esto indica que hay suficiente sangre en la tira reactiva. Si el símbolo ⌚ no parpadea, puede volver a aplicar sangre en un espacio de cinco segundos.

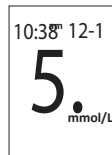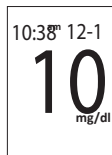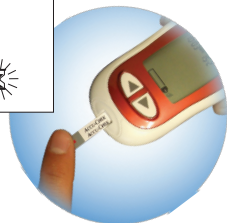

9.- Una vez que aparezca el resultado, deseche la tira reactiva usada.

IMPORTANTE:

- A. No utilice tiras de prueba vencidas. Revise la fecha de vencimiento impresa en cada uno de los frascos de tira de prueba y la caja.
- B. Utilice la tira de prueba inmediatamente después de abrirla. No utilice la tira de prueba si está doblada, raspada, mojada o dañada. No corte la tira de prueba.

CONCLUSIÓN:

1. Para apagar el monitor, oprima y suelte el botón. El monitor se apaga automáticamente después de 15 segundos.
2. Retire la tira de prueba del monitor para desecharla. Deseche las lancetas usadas en un contenedor resistente a la punción.
3. Guarde el monitor, los productos de prueba y la guía de referencia rápida.

Importante:

- A. Nunca utilice una tira de prueba usada.
- B. No utilice lancetas usadas. No comparta una lanceta usada o dispositivo de punción.
- C. La superficie del monitor puede limpiarse con un trapo húmedo y jabón.

Favor de leer con atención las instrucciones sobre el producto en el manual de usuario antes de utilizarlo.



Diinsel S.A. de C.V.
Venezuela 342, Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L.
México 64620
Tel.: (81) 8040-2972 Fax: (81) 8040-2973
Lada sin Costo: 01-800-777-0010

info@diinsel.com
www.diinsel.com

Productos de calidad para su seguridad